

➤ Optionen und Zubehör für *Red*[®] Multifunktions-Rollstühle: *Azalea*[®], *Azalea*[®] Assist, *Bellis*

Rückenausführung



Rückenplatte

Die Rückenplatte (höhenverstellbar) bietet in Kombination mit den entsprechenden Kissen eine feste und stabile Unterstützung. Der obere Teil kann bei Bedarf abgenommen werden.



Anpassrücken

Der Anpassrücken ist in der Höhe verstellbar und kann über Klettbander individuell eingestellt werden. Kombinierbar mit entsprechenden Überzügen oder Kissen.

Rückenkissen und -polsterung



Überzug, dünne Version 05

Passt sich exakt an die eingestellte Rückenform des Benutzers an.



Überzug, dicke Version 05

Dieser Überzug bietet durch seine Form eine große seitliche Unterstützung für den Benutzer.



Laguna Rücken

Das **Laguna** Rückenkissen mit gutem seitlichen Halt ermöglicht dem Benutzer optimale Unterstützung,




Mistral² Rücken

Das Rückenkissen **Mistral²** mit seiner tiefen seitlichen Formgebung bietet besten Halt und Sitzstabilität und stellt die Bewegungsfreiheit im Schulterbereich sicher.



Passad² Rücken

Optimale Unterstützung im oberen Schulterbereich durch verstärkte Seiten für Benutzer, die einen besonders großen Halt benötigen.

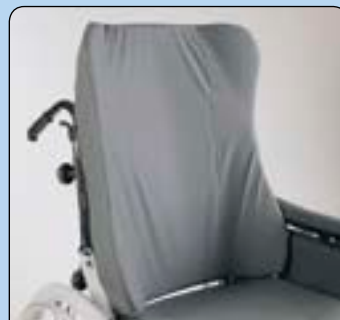

Rückenkissen für große Benutzer (Hoch 05)

Optimale Schulterunterstützung und Halt durch entsprechende Formgebung. Ideal für große Benutzer mit großer Oberkörpergröße (wie Rückenkissen **Passad²**, nur 10 cm höher).

Schiebegriffe



Schiebhebügel

Höhenverstellbar und so geformt, dass ein ergonomisch gutes Handling gewährleistet ist.



Schiebegriffe

Die höhenverstellbaren Schiebegriffe sind über eine Stabilisierungsstange verbunden.

Sitzneigung und Rückenverstellung



Manuelle Sitz- und Rückenwinkelverstellung durch die Begleitperson

Die Gasdruckfedern zur Verstellung von Sitz- und Rückenwinkel werden durch Betätigen der Hebel aktiviert.



Elektrische Sitz- und Rückenwinkelverstellung

Individuelle Einstellung mit Hilfe eines Handschalters und eines Motors durch Benutzer oder Begleitperson.

Beinstützen und Fußplatten



Zentrale Beinstütze (Rea® Bellis)

Diese Beinstütze ist höhen-, tiefen- und winkelverstellbar. Eine kompakte Unterstützung und Halt für die Beine.



Winkelverstellbare Beinstütze mit einstellbaren Fußplatten (optional fest)

Der hohe Drehpunkt im Kniebereich sorgt für einen kompensierenden Längenausgleich der Unterschenkel.



Feste Beinstütze 80°

Nach innen und außen abschwingbar. Optional erhältlich mit fester oder verstellbarer Fußplatte.



Amputationsbeinstütze

Verstellbar in Höhe, Tiefe und im Winkel für optimalen Halt mit großer Auflagefläche. Nach innen und außen abschwingbar.



Fußplattenverlängerung

Armlehnen



Höhenverstellbare Armlehne mit breiter Armauflage

Die Armpolster sind im vorderen Bereich abgerundet, um das Ein- und Aussteigen zu unterstützen.



Höhenverstellbare Armlehne, abnehmbar mit schmaler Armauflage (Rea® Bellis)

Die Armpolster sind im vorderen Bereich abgerundet, um das Ein- und Aussteigen zu unterstützen.



Feste Armlehne mit schmaler Armauflage (Rea® Bellis)

Abnehmbare Armlehne, fest mit kurzer Armauflage.




“Nice” Armlehne rückschwenkbar mit breiter oder schmaler Armauflage (Red® Bellis)

Seitenteil ist rückschwenkbar; abnehmbar und höhenverstellbar. Die Sitzbreite kann um +/- 1 cm reguliert werden.



Hemiplegie Armauflage

Verstellbar in Höhe, Tiefe und im Winkel. Der hemiplegische Arm kann in die optimale Position gebracht werden.

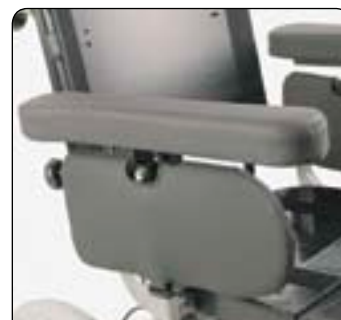

Seitenteilabdeckung

Das Kunststoff-Seitenteil wird durch den Überzug gepolstert und abgedeckt.



Einlegekissen für Seitenteilabdeckung

Dient zur besseren Abpolsterung bei Druckstellengefahr (2 cm dick). Sitzbreite wird um 2 cm je Seite verringert.



Therapietisch

Kann durch Lagerung zur Entlastung führen und die Therapie des Patienten unterstützen.

Zubehör für Sitz und Rücken



Rückenkeile

Positioniert hinter dem Rückenkissen zur Unterstützung des Lumbalbereichs.



Abduktionskeil

2-fach tiefenverstellbar und abnehmbar. Verhindert das Abrutschen des Nutzers.



Kopfstütze seitlich einstellbar

Ideal für Positionierung von Kopf und Nacken. Die Kopfstütze ist höhen-, tiefen- und winkelverstellbar.



Kopfstütze mit Unterstützung für das Kinn

Optimal für die Stabilisierung des gesamten Kopfbereichs. Höhen-, tiefen- und winkelverstellbar.



Kopfstütze einfach

Unterstützung für Kopf und Nacken.



Inkontinenz-Bezug

Waschbar bei 100°.



Seitenpelotte

Durch die vielen Verstellmöglichkeiten optimal auf die Bedürfnisse des Benutzers einstellbar. Geeignet für alle Rückenkissen und Überzüge.



Seitenpelotte wegschwenkbar

Kann zum Patiententransfer weggeschwenkt werden.

Vorderräder und Befestigung



Gabelschnellverschluss (Rea® Bellis)

Die Vorderradgabel kann durch eine Steckachsenverbindung gelöst werden. Bessere Transportmöglichkeit für den Rollstuhl.



5" - 8" Vorderräder

Erhältlich in verschiedenen Stärken. Pannensicher oder Luftbereifung.



Greifreifen

Ausführungen in Aluminium, Edelstahl und weichschaumbezogen.

Sicherheitszubehör



Hand- und Speichenschutz Frost



Einarmbremse (Rea® Bellis)
Durch Betätigen des Hebels auf einer Seite werden beide Bremsen aktiviert.



Trommelbremse für 12", 16", 22" und 24" Hinterräder
Erhöhte Sicherheit durch verbesserte Bremswirkung.



Haltegurt



Reflektoren-Kit



Automatische Armlehnenverriegelung
Sichert die abnehmbare Armlehne gegen Herausrutschen.

Zubehör



Klinik-Kit
Für alle Standardeinstellungen.
Kein Werkzeug erforderlich.



Stockhalter