

## Invacare® **Platinum® 9**

### **Der effiziente Sauerstoff-Konzentrator mit hoher Leistung und geringen Kosten**

Der Invacare® **Platinum® 9** Sauerstoff-Konzentrator bietet eine hohe Flussrate bis 9 l/min. und Invacare® **HomeFill® II** Kompatibilität. Er ermöglicht eine höchst effiziente sowie kostengünstige Sauerstoffversorgung über 5 l/min. ohne zusätzliche wiederkehrende Lieferkosten.

Der **Platinum® 9** bietet eine hohe Sauerstoffkonzentration bei geringen Wartungskosten. Integrierte Alarmsysteme und einfache Bedienbarkeit erlauben dem Patienten einen sicheren Gebrauch zu Hause.



## ➤ Leistungsstärke und Zuverlässigkeit bei einfacher Bedienbarkeit

Der *Invacare® Platinum® 9* ist leistungsstark, zuverlässig und einfach zu bedienen. Mit einer Abgabe von 9 l/min. und 95,6% - 87% Sauerstoff ist er besonders für Patienten mit hohem Sauerstoffbedarf geeignet. Durch seine kompakten Abmessungen und dem geringem Gewicht lässt sich der *Platinum® 9* leicht handhaben. Weiterhin bietet er dem Nutzer besondere Sicherheit:

- Nutzerfreundlicher Flussmesser
- *Invacare® Sens O<sub>2</sub>-System* zur permanenten Kontrolle
- Mit integriertem Handgriff und Laufrollen
- Klares, übersichtliches Bedienfeld
- Doppel-Hubkolbenkompressor
- Bewährte Platinum-Baureihentechnik



## ➤ Kosteneffizienz, Servicefreundlichkeit und geringe Wartungskosten

Geringe Wartungskosten durch hohe Baugleichheit von *Invacare® Platinum® S* und *Invacare® Platinum® 9*. Die permanenten Lieferkosten für eine Sauerstoffversorgung mit hohen Flussraten entfallen.



**Praktische  
Netzkabelbefestigung**



**Servicefreundlich und  
zuverlässig**



**Füllstation  
*Invacare® HomeFill® II*  
jederzeit anschießbar**

## Technische Daten

### Leistungscharakteristik

- Ausgangsfluss
- Sauerstoffkonzentration
- Ausgangsdruck
- Temperatur am Sauerstoffausgang
- Schalldruckpegel
- Alarmfunktion

1 bis 9 l/min. (stufenlos)

95,6% - 91%

95,6% - 87%

0,6 bar bzw. 62 kPa ± 5 %

+ 2,2°C zur Umgebungstemperatur

< 50 dB(A)

batteriefreies Selbst-Diagnosesystem mit optisch-akustischen Fehlermeldungen, wie z. B. Niedrigflussalarm < 1 l/min.

### Sens O<sub>2</sub>-System

O<sub>2</sub>-Konzentration

- höher als 85%  
- Grünes Licht -  
**Normal**

- zwischen 73% und 85%  
- Gelbes Licht -  
**Filter und Flussrate überprüfen**

- niedriger als 73%  
- Rotes Licht -  
**Servicetechniker anrufen**

### Lieferumfang

*Invacare® Platinum® 9*

1509581 Nasenkanüle für Erwachsene, 6 bis 15 l/min.

1509582 Befeuchterflasche, nachfüllbar (350 ml)

2000799 Schlauch (220 mm) mit Anschlussadapter für Befeuchterflasche


### Betriebsspannung und Leistungsaufnahme




230 V




475 W

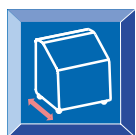

365 mm

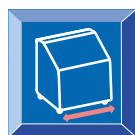

467 mm

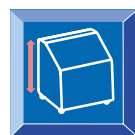

670 mm



24 kg

### Maße und Gewicht

**HMV-Nr.: 14.24.04.0xxx**  
**Bestell-Nr.: IRC9LXO2AWQ-DE**

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Irrtümer vorbehalten.